

Frequently Asked Questions

WHAT HAPPENS DURING LIPOSELECTION?

First, the area to be reshaped is filled with a special saline solution that helps numb the site and shrink the blood vessels (to minimize blood loss and reduce bruising). This solution wets and fills the area to be treated, making it easier to break up fatty tissue with the VASER System's sound energy. Then a small probe transmits sound energy (similar to that used for cataract removal from the eye) that fragments fatty tissue on contact, while leaving other important tissues relatively intact. Finally, the liquefied fat is removed through a gentle suction process designed to minimize damage to surrounding tissues.



When It Comes To Your Body Choose LipoSelection.

WHY LIPOSELECTION? IS LIPOSELECTION DIFFERENT THAN TRADITIONAL LIPOSUCTION?


LipoSelection...only by VASER is a new way to precisely and efficiently remove unwanted fat. An alternative to the harsh techniques of traditional liposuction, LipoSelection uses state-of-the-art ultrasound technology to reshape your body. Only the LipoSelection procedure uses the patented VASER System to **first** liquefy and **then** remove fat from the body, providing smooth results. Patients report low to minimal pain, swelling and bruising.*

HOW CAN I BE CERTAIN LIPOSELECTION IS RIGHT FOR ME?

If you are frustrated by the resistance of certain body areas to diet and exercise, LipoSelection...only by VASER can provide a solution. If you are healthy and seeking a fast, low-pain solution for losing stubborn fat deposits, the LipoSelection procedure could be your answer. Although there are limits to the amount of fat that can be removed, your doctor can assist you with your decision about potential areas for sculpting, anticipated results, and the recovery process.

* In an independent peer-reviewed published study ["Clinical Application of VASER-assisted Lipoplasty: A Pilot Clinical Study" (2002, March); Aesthetic Surgery Journal 22(2): 131-146], three prominent plastic surgeons who treated 77 patients with the VASER® System reported low to minimal post-operative pain, bruising and swelling, as well as no complications, no required re-treatments, and both patient and surgeon satisfaction.

Seeing is Believing

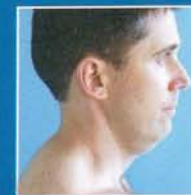

BEFORE



AFTER



BEFORE



AFTER



BEFORE



AFTER



BEFORE



AFTER

Before and After images are of actual LipoSelection...only by VASER patients who have consented to our use of their photographs. Results shown are not necessarily the results you may obtain, as results will vary from patient to patient. All other brochure images are of professional models.

WHAT BODY AREAS CAN BE TREATED WITH LIPOSELECTION?

Doctors have experienced great success in treating all of the following areas: abdomen, thighs, knees, buttocks, hips, back, arms, male breasts, love handles, chin and neck areas.

WHAT IS MY ANTICIPATED RECOVERY TIME?

This varies with the extensiveness of the procedure – the amount of fat removed, the number of sites treated, and so on. It is important that you establish realistic expectations through discussion with your doctor.

Body
Be Selective.



LIPOSELECTION®
only by VASER®

When It Comes To Your Body Be Selective

Medical advances in cosmetic and plastic surgery are remarkable. If you're thinking about a procedure, you owe it to yourself to look at new and progressive techniques.




Distributor:

GiGATT
International Marketing Pte Ltd

55 Ubi Ave 1 #07-08 Singapore 408935
Tel: (65) 6547 1713 Fax: (65) 6547 1992
Email: gigatt@gigatt.net
Website: www.gigatt.net

The art of a beautiful body

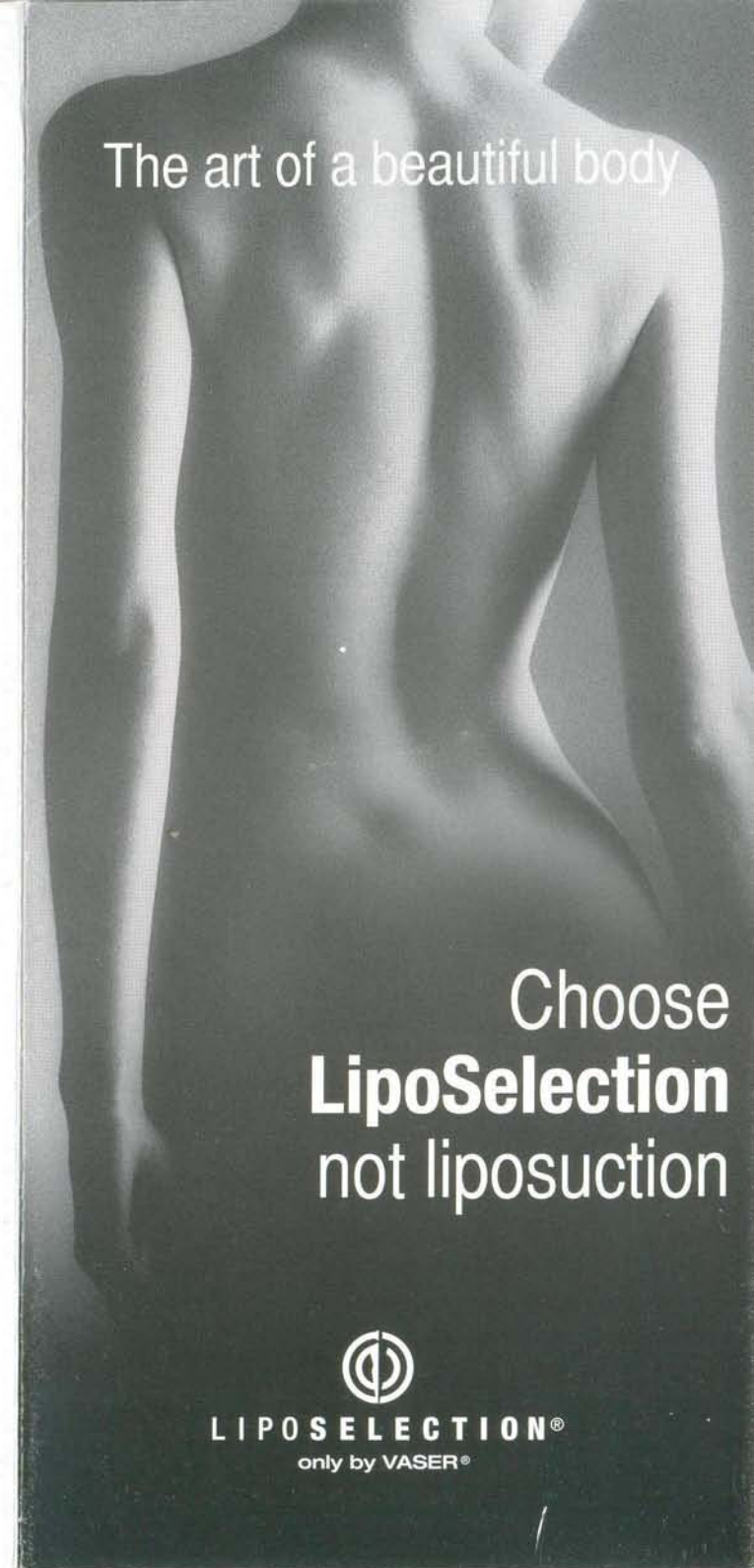

Choose
LipoSelection
not liposuction



LIPOSELECTION®
only by VASER®



LIPOSELECTION®

only by VASER®


Fact Sheet

WHAT

- **LipoSelection® only by VASER®** is an innovative body sculpting option that uses patented VASER® technology to break up and permanently remove unwanted fat, while minimally disturbing other important tissues critical to an optimal recovery and smooth results.
- VASER stands for **V**ibration **A**mplification of **S**ound **E**nergy at **R**esonance.
- Until now, traditional surgical fat removal procedures have been more about mechanical avulsion and suction of fatty tissue (including surrounding nerves, blood vessels and connective tissue).

HOW

1. The physician makes a tiny incision in the targeted area, and infuses a saline solution mixed with lidocaine and epinephrine to help shrink blood vessels and numb the area to be treated.
2. The physician then inserts a small patented probe that emits ultrasonic waves to selectively break up fat deposits, leaving important tissues relatively intact.
3. Once the fatty tissue is emulsified, it can be removed through the small incision with massage and/or controlled suction designed to be gentle. Any residual fatty tissue not removed from the body is either absorbed or smoothly reshaped to the patient's contour.

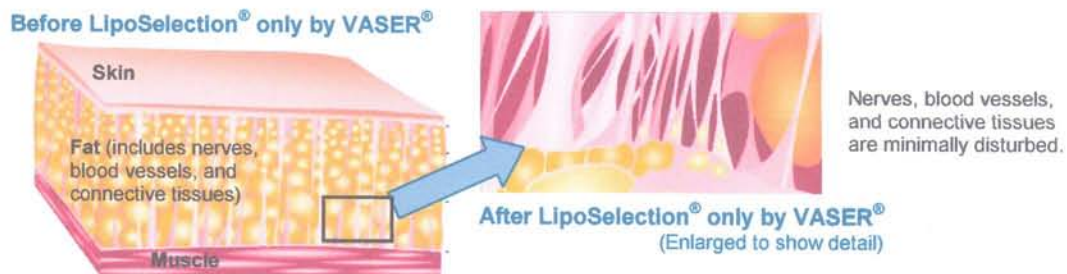

WHY

- Blood vessels are minimally disrupted = **LipoSelection** patients report low to minimal bruising.
- Nerves are minimally disrupted = **LipoSelection** patients report low to minimal pain.
- Connective tissues are minimally disrupted = **LipoSelection** patients & physicians report smooth, predictable results and tight contours.

WHERE

- Physicians report success in treating all of the following areas: abdomen, thighs, knees, buttocks, hips back, arms, breasts, love handles, chin and neck areas.
- The VASER System's versatility and precision allows for efficient treatment of various tissue types – from very delicate to very fibrous.
- The LipoSelection procedure is performed in a clean environment such as a doctor's office, an outpatient surgery center or a hospital.

WHO

- Physicians across the country are currently performing LipoSelection only by VASER.
- The VASER is manufactured by Sound Surgical Technologies LLC, a Colorado Limited Liability Company founded in July 1998. The VASER System received FDA clearance for use in lipoplasty in June 2002, and currently holds 11 US Patents.

Its LipoSelection[®], *not liposuction*

NEW: LipoSelection	OLD: liposuction
<p>Ultrasound based</p> <p>Tissue selectivity (leaves important tissues largely intact) results in:</p> <ul style="list-style-type: none">Smooth contouringLow to minimal painResume activities quicklyMinimal swelling and bruising <p>Gentle wrist motion by surgeon: Precise sculpting and contour finesse</p> <p>Designed to treat common as well as delicate areas such as arms, chin, neck, knees, and inner thighs; and fibrous areas such as the back</p>	<p>Suction based</p> <p>Tissue damage (inability to differentiate fat from nerves, blood vessels, connective tissues) results in:</p> <ul style="list-style-type: none">Potential for uneven resultsPotential for painful recoveryPotential for lengthy recoveryPotential for swelling and bruising <p>Large, "mechanical" arm movement by surgeon: Difficult to achieve sculpting</p> <p>Commonly used on abdomen, thighs, hips, and love handles (elevated risk when treating delicate areas)</p>

Physicians in your area are performing the LipoSelection procedure and are available for interview!
Call to obtain their names, discuss story topics, or to learn more about this unique procedure that combines patented technology and advanced surgical techniques to achieve optimal results.

www.liposelection.com
888-471-4777



Press Contact: Tiffany Dunning
tiffany@vaser.com
303-459-5722

ศิลปะแห่งความงามบนเรือนร่าง

ทางเลือกใหม่ของการเลือกกำจัดเฉพาะไขมัน (Lipo Selection) โดย Vaser System ขึ้นตอนแรก จะฉีดสารละลายน้ำเกลือพิเศษเข้าบริเวณที่ต้องการกำจัดไขมัน เพื่อช่วยให้เกิดอาการชาและทำให้หลอดเลือดบริเวณนั้นหดตัว ซึ่งช่วยให้การสูญเสียเลือดน้อยที่สุดและลดการเกิดรอยจ้ำ นอกจากนี้สารละลายนี้จะทำให้การแตกตัวของเนื้อเยื่อไขมันด้วยการใช้พลังงานคลื่นเสียงของระบบ Vaser โดยจะใช้เครื่องมือขนาดเล็กปล่อยพลังงานคลื่นเสียง (คล้ายเครื่องมือที่ใช้ในการถอดคิ้วกระจกจากดวงตา) ไปยังบริเวณเนื้อเยื่อไขมันเพื่อให้ละลายไขมันและใช้ขั้นตอนการดูดไขมันที่ละลายนั้นออกมา โดยให้เนื้อเยื่อบริเวณรอบๆ เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

ทำไมต้องเลือก Liposelection ?

Liposelection แตกต่างจาก Liposuction อย่างไร ?

Liposelection... Only by VASER เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถกำจัดไขมันส่วนเกิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงเทคนิคที่รุนแรงและอันตรายจากวิธี Liposuction แบบดั้งเดิม Liposelection ใช้เทคโนโลยีของ อัลตราซาวด์ เพื่อปรับเรือนร่างให้ได้สัดส่วน Liposelection เป็นวิธีเดียวที่ใช้ VASER system ได้สิทธิบัตรในการละลายเนื้อเยื่อไขมันและดูดไขมันออกจากร่างกายและให้ผลที่ดีมีประสิทธิภาพมีผลข้างเคียงต่ำ เป็นต้นว่ารู้สึกเจ็บ อาการบวม หรือการเกิดรอยจ้ำน้อยมาก

คุณสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่า Liposelection เหมาะกับคุณ ?

ถ้าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาที่ต้องอดทนกับการรออาหาร หรือออกกำลังกายเพื่อให้รูปร่างได้สัดส่วน Liposelection... Only by VASER สามารถช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้ ถ้าคุณเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี และต้องการหาวิธีที่เร็ว เจ็บปวดน้อย ในการกำจัดไขมันส่วนเกินเฉพาะส่วน Liposelection คือคำตอบที่ช่วยแก้ปัญหาของคุณได้ ถึงแม้ว่าอาจมีข้อจำกัดของปริมาณไขมันที่ถูกกำจัดออก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยคุณได้ในการปรึกษาและตัดสินใจเพื่อให้ได้ผลที่สามารถคาดหวังได้

บริเวณใดของร่างกายที่สามารถรักษาด้วย Lipo Selection ?

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการรักษาบริเวณต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ หน้าท้อง ต้นขา เข่า สะโพก หลัง แขน หน้าอกผู้ชาย คาง และ บริเวณคอ

ความคาดหวังระยะเวลาการพักฟื้น

ระยะเวลาการพักฟื้นจนกระทั่งปกติ จะแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณไขมันที่ถูกกำจัด จำนวนบริเวณที่ต้องการกำจัดไขมันและอื่นๆ ข้อสำคัญ ของที่ว่าคุณมีความต้องการหรือความคาดหวังผลที่แท้จริงในระดับไหน ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาแก่คุณได้

VASER LipoSelection คืออะไร ต่างจากการดูดไขมันอย่างไร ?

VASER (Vibration Amplification of Sound Energy at Resonance) คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สามารถละลายไขมันได้มากกว่าการดูดไขมัน แต่ต้นทุนและผลข้างเคียงน้อยกว่าการดูดไขมันมาก คนใช้ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการดูดไขมันทั่วไป

VASER เป็นเทคโนโลยี Ultrasound ขั้นสูงสามารถเลือกทำลายเป้าหมายคือไขมัน อย่างจำเพาะเจาะจง (LipoSelection) โดยไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียง เช่น เส้นประสาท เส้นเลือด และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอื่นๆ

นอกจากนั้น VASER ยังช่วยให้ผิวกระชับและฟื้นตัวเร็ว ทำให้ได้ผลการละลายไขมันที่ดีที่สุดขณะที่มีผลข้างเคียงน้อยที่สุด ไม่มีปัญหาเรื่องผิวช้ำหรือเป็นโพรงเหมือนการดูดไขมันในอดีต

VASER LipoSelection ทำงานอย่างไร ?

การทำงานของ VASER มี 3 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ

1. แพทย์จะเติมสารละลายน้ำเกลือชนิดพิเศษเข้าไปบริเวณที่ต้องการกำจัดไขมัน เพื่อช่วยให้เกิดอาการชาและทำให้หลอดเลือดบริเวณนั้นหดตัว ซึ่งช่วยให้การสูญเสียเลือดน้อยที่สุดและลดการเกิดรอยช้ำ
2. ใช้พลังงานคลื่นเสียงของระบบ VASER ซึ่งมีหัวขนาดเล็กปล่อยคลื่นเสียง (ซึ่งเป็นพลังงานคลื่นเสียงที่มีความถี่เดียวกับเครื่องรักษาต่อกระดูกงูตา) เข้าไปยังบริเวณเนื้อเยื่อไขมันเพื่อละลายไขมัน
3. ไขมันที่ถูกกลายเป็นของเหลวทั้งหมด จะถูกดูดออกอย่างนุ่มนวล โดยเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆ เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

VASER LipoSelection ได้ผลอย่างไร ?

ได้ผลดีมากกับไขมันส่วนเกินที่ไม่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าท้อง สะโพก เอว ต้นขา หรือแม้แต่บริเวณขนาดเล็กอย่างเช่น ต้นแขน หลัง หัวเข่า ใต้คาง บริเวณคอ และหน้าอกผู้ชาย นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาลักษณะต่างๆ ของร่างกายได้ดังนี้

- ปรับรูปร่างให้ได้สัดส่วนเฉพาะบริเวณที่ต้องการ
- ปรับสัดส่วนรูปร่างที่มีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ด้วยการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร
- ช่วยให้ผิวเนียนเรียบและกระชับ

Vaser LipoSelection ช่วยให้รูปร่างที่ได้สัดส่วนหลังการรักษาเพียงครั้งเดียว มีรอยช้ำน้อย ฟื้นตัวเร็ว

ระยะเวลาการพักฟื้น

ระยะเวลาการพักฟื้นจนกระทั่งปกติของคนไข้จะแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณไขมันที่ต้องการกำจัด และจำนวนบริเวณที่ดูดไขมันมีกี่จุด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาได้



THE VASER SYSTEM



THE VENTX™ CANNULA



VASER GROOVED PROBES

Patented **Technology**...Only By **VASER®**

The technology behind tissue selectivity

The Lipo**Selection**SM Difference

THE VASER AMPLIFIER

- VASER ultrasonic energy fragments adipose tissue leaving collateral tissue such as collagen, blood vessels and nerves relatively intact.
- The VASER Pulse Mode lowers the amount of energy delivered to the target area — while the advanced energy delivery ensures maximum efficiency.

GENTLE ASPIRATION

- Smooth balance-ported design on the patented VentX™ Precision Vented Cannula designed to minimize tissue damage.
- Allows for fine body sculpting and feathering — helps to minimize post-op swelling and bruising.

PATENTED GROOVED PROBES

- The VASER System uses a patented ultrasonic probe to fragment adipose tissue.
- The VASER probe vibrates a short distance back and forth at 36,000 times per second.
- One, two and three groove patterns increase fragmentation efficiency for fibrous, medium, and soft tissue types.

THE ADVANTAGES OF ULTRASOUND ENERGY

- Tissue selectivity helps minimize the risk of thermal injury
- Tissue selectivity helps minimize damage to significant blood vessels and connective tissue, resulting in low to minimal swelling during and after the procedure
- Efficient on fibrous areas like the back and chest, as well as on delicate areas like the inner thighs, arms, neck and chin
- Patients report low to minimal pain

Experience the VASER difference! Call **888-471-4777**

to schedule a case using the VASER system.

Or visit us on the web at www.vaser.com

When It Comes To Your Patients **Be Selective**

Choose Lipo**Selection**SM...only by **VASER®**




LIPOSELECTIONSM

only by VASER

Patented **Technology**...Only By **VASER**[®]

VASER[®] Grooved Probes & Handpieces

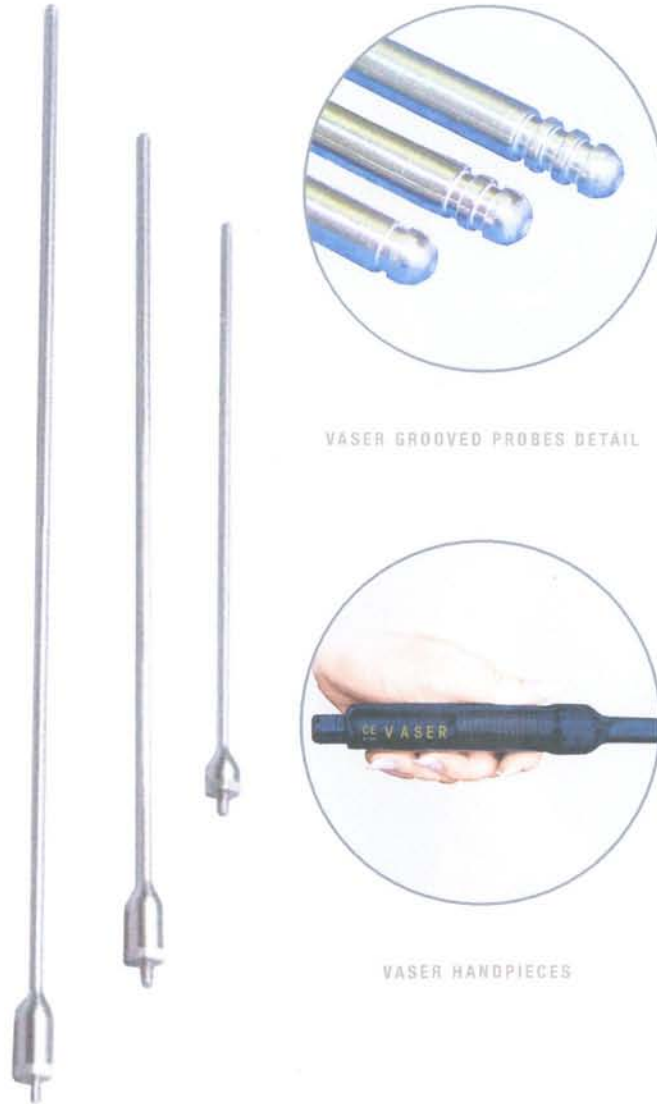

VASER GROOVED PROBES DETAIL

VASER HANDPIECES

THE PATENTED VASER GROOVED PROBES

- One, two and three groove patterns designed to increase fragmentation efficiency for fibrous, medium, and soft tissue types
- The 3.7mm diameter probes are intended for rapid debulking and contouring of medium to large volumes of soft to fibrous tissue
- The 2.9mm diameter probes are intended for debulking and fine contouring of smaller volumes of soft to extremely fibrous tissue
- The 2.2mm diameter probes are intended for highly sensitive areas
- Available in 11cm, 18cm, 26cm, and 33cm lengths
- Precision machined from titanium
- US Patent No. 6,368,299

VASER HANDPIECES

- Small, elegant handpieces optimize artistic sculpting capability
- 36 kHz Frequency

Experience the VASER difference! Call **888-471-4777**

to schedule a case using the VASER system.

Or visit us on the web at www.vaser.com

When It Comes To Your Patients **Be Selective**

Choose Lipo**Selection**SM...only by **VASER**[®]



LIPOSELECTIONSM
only by VASER[®]